

SDR™


Smart Dentin Replacement



Без стресова обтурация в комбинация със SDR


Използвайте Palodent® Plus заедно със SDR!

Това е бърза, лесна процедура, която осигурява плътно маргинално запечатване, точни контакти и сигурност на вашето възстановяване.

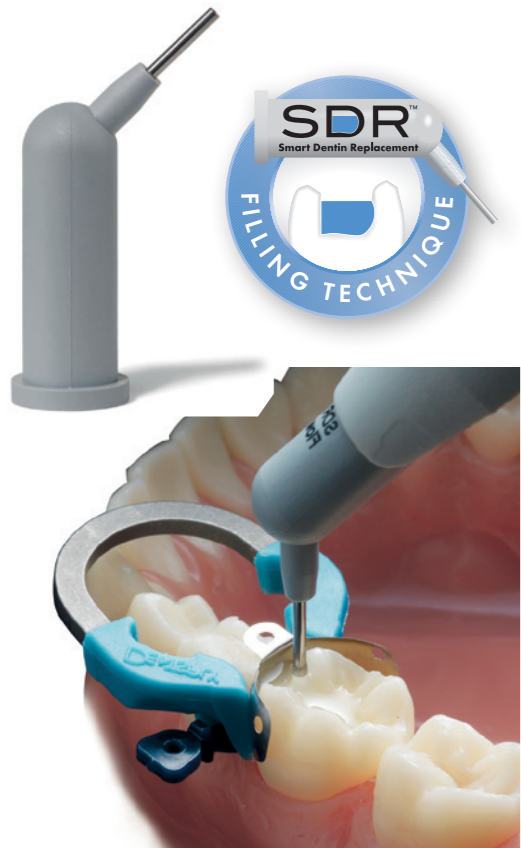

Конвенционална процедура

SDR™
Smart Dentin Replacement

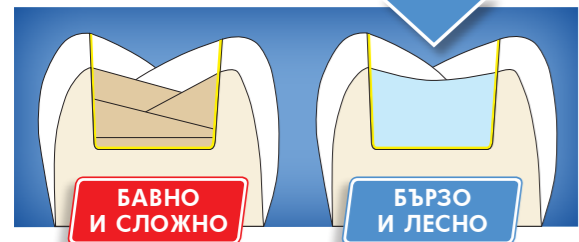

- Аплициране до 4 мм без отделно послойно нанасяне.
- Отлична адаптация към кавитета, подобна на тази на течните композити.
- Съвместим с композита, който използвате в момента.*

* Химически съвместим с адхезиви и композити на метакрилатна основа

PalodentPlus™

Sectional Matrix System

Информация за опаковките

659700 Въвеждащ комплект

100 Матрици – по 25 от всеки размер: 3.5 мм, 4.5 мм, 5.5 мм, 6.5 мм;
75 Кличета – по 25 от всеки размер: малки, средни, големи;
30 Предпазни матрици с клинче – 10 от всеки размер: малки, средни, големи;
1 Универсален пръстен; 1 Стесен пръстен; 1 Форцепс; 1 Pin-пинсета.



625.00.001 Стартов комплект

20 Матрици – 15 x 5.5 мм, 5 x 4.5 мм;
15 кличета – по 5 от всеки размер: малки, средни, големи;
5 Предпазни матрици с клинче – средни;
2 Универсални пръстена; 1 Форцепс; 1 Pin-пинсета;
1 SDR мостра: 4 комплекта.



Опаковка матрици

659710 Размер 3.5 мм (50 в опаковка)
659720 Размер 4.5 мм (50 в опаковка)
659730 Размер 5.5 мм (50 в опаковка)
659740 Размер 5.5 мм (100 в опаковка)
659750 Размер 6.5 мм (50 в опаковка)



Опаковка пръстени

659760 Универсален (2 в опаковка)
659770 Стеснен (2 в опаковка)



Опаковка кличета

659780 Малки (100 в опаковка)
659790 Средни (100 в опаковка)
659800 Големи (100 в опаковка)



Опаковка предпазни матрици с клинче

659830 Малки (50 в опаковка)
659840 Средни (50 в опаковка)
659850 Големи (50 в опаковка)



659810 Форцепс (1)

659820 Pin Пинсета (1)



SDR™

Smart Dentin Replacement

606.03.000 SDR™ Начален комплект

45 комплекта универсален цвят (0.25 г всяка); 1 Пистолет за комплекта; 1 Хепо®V+ (2.5 мл).



606.03.002 SDR™ Поддържащ комплект

15 комплекта универсален цвят (0.25 г всяка).




606.03.003 SDR™ Еко комплект

50 комплекта универсален цвят (0.25 г всяка); 1 SDR™ кутийка за съхранение.



K792006.03.02

ПРЕДВИДИМИ ПЛЪТНИ КОНТАКТИ

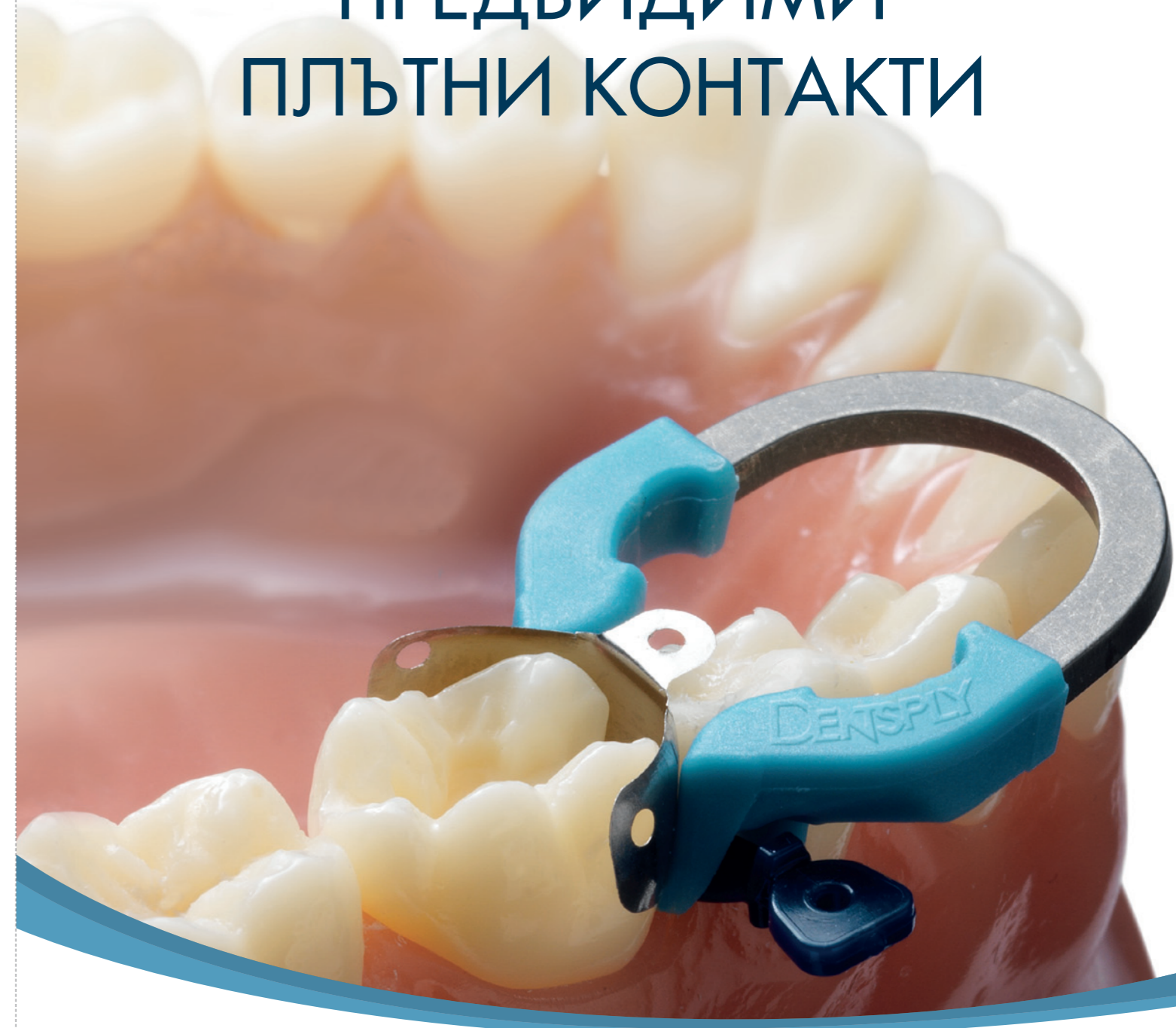

PalodentPlus™

Sectional Matrix System

For better dentistry

DENTSPLY

For better dentistry

DENTSPLY

DENTSPLY DeTrey GmbH
De-Trey-Str. 1
78467 Konstanz
GERMANY
www.DENTSPLY.de

Търговски представител за България:
DENTSPLY PALODENT & DeTrey
Димитър Марков, 0886 341886
e-mail: Dimitar.Markov@dentsply.com
Dentsply Office for Central East Europe:
DENTSPLY AUSTRIA GmbH
Liesinger Flurgasse 4
1230 Vienna, AUSTRIA


Елиминирание на стреса при втори клас възстановявания

- ✓ Предвидими плътни контакти
- ✓ Плътно гингивално прилепване
- ✓ По-малко излишъци от материал, по-малко довършителни процедури
- ✓ Лесна за употреба система

Изразен маргинален ръб за възстановяване на идеалната анатомия

Гингивална козирка: предотвратява образуването на шупли и процепи в областта на гингиво-аксиалния ъгъл

По-голяма извивка: матрицата обхваща плътно зъба

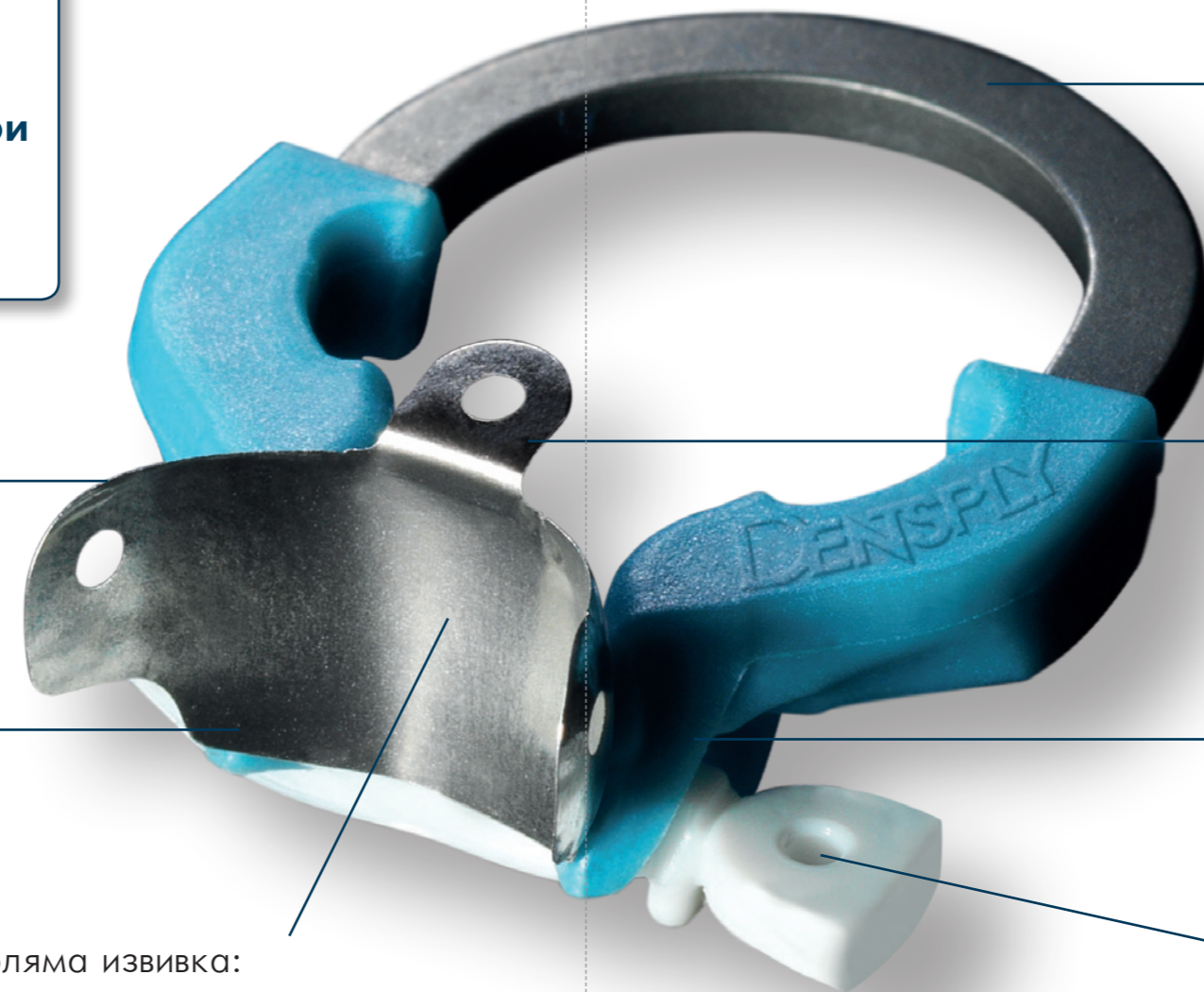

Ni-Ti сплав с памет за формата, изключителна еластичност и издръжливост, до 1000 пъти автоклавируема

Ушички за лесно поставяне и отстраняване


V-образни пластмасови зъбчета, подсилени с фибростъкло, за задържане и фиксиране на клинчето

Отвори за Pin пинсета за по-лесно поставяне и отстраняване

МОД кавитети



Дълбоки комплексни кавитети

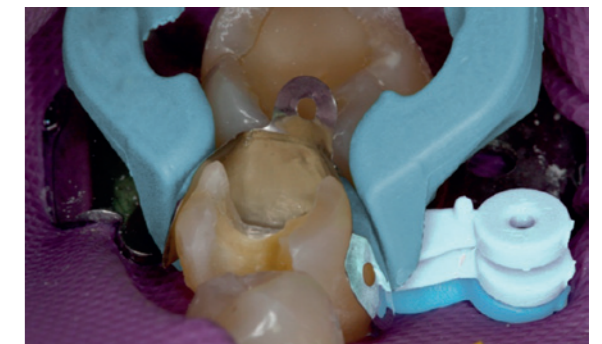

Липсващи туберкули



ПРЕЦИЗНИ ПРЕДПАЗНИ МАТРИЦИ С КЛИНЧЕ "WEDGE GUARD"

- + По-нисък риск от интер-проксимално увреждане на съседния зъб.
- + Бързо и лесно препариране на кавитета.
- + Предпазната матрица се откача след препаратията, като клинчето остава на мястото си.



АНАТОМИЧНИ КЛИНЧЕТА

- + Крилцата се свиват и разширяват, за лесно поставяне и уплътняване.
- + Вдлъбнатата долна повърхност позволява поставянето на втори щифт от противоположната страна.



МАТРИЦИ С УШИЧКИ

- + 3,5 мм: за детски зъби и консервативна препаратия на премолари.
- + 4,5 мм: средно големи по размер кавитети на премолари.
- + 5,5 мм: най-често срещаните по размери II клас кавитети на молари.
- + 6,5 мм: дълбоки и широки кавитети, възстановяване на туберкул при молари



УДОБЕН ЗА РАБОТА ФОРЦЕПС

- + Функция "заклучване" и работни рамена под ъгъл за сигурно задържане на пръстена.
- + Вдлъбнатини по вътрешната част на работните рамена за пристягане и връщане първоначалната форма на пръстена.



СПЕЦИАЛНА PIN ПИНСЕТА

- + Зъбчето при върха навлиза в отвора на матрицата и клинчето и осигурява позитивно и сигурно захващане.
- + Нормално състояние в затворена позиция: по-малък риск от изпускане на матрицата и клинчето.
- + Топче-полировчик (гладилка) се оформя от върховете на пинсетата.



ИЗДРЪЖЛИВИ Ni-Ti ПРЪСТЕНИ

- + Универсален
- + Тесен за премолари

