




Ново ниво на гласхибридната технология

Перфектно решение при подмяна на стари амалгамени възстановявания

Материалът може да бъде нанесен наведнъж и е лесен за компактизиране и контуриране. Отнема само 3'25" за да завършите възстановяването си!

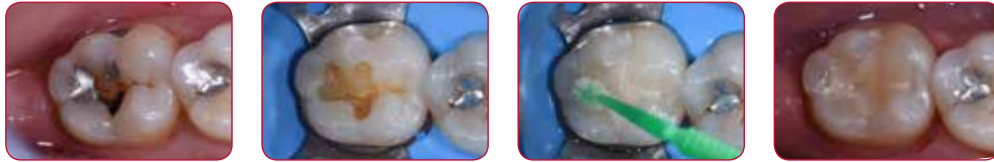

Предоставено от Dr. M Basso, Италия

Лесни дистални възстановявания само в няколко стъпки - без допълнителна излоация

Толерантността към влагата на EQUIA Forte HT позволява лесно възстановяване на дълбоки кавитети, дори когато не може да се постави кофердам. Употребата на секторна матрица допринася за дълготрайността на възстановяването.



Предоставено от Dr. Z Bilge Kütük, Турция

Възстановяване на чувствителни, хипоминарализирани МИХ зъби при млади пациенти

Химичната връзка на материала - еднаква и при нетретиран дентин - предлага устойчиво решение при случаи, в които връзката е компрометирана. Материалът се нанася лесно чрез частично ръчно премахване на кариеса, правейки го лесен за употреба и при хиперчувствителни пациенти.



Предоставено от Dr. P. Rouas, Франция

EQUIA Forte HT от GC

Сила, съчетана с красотата

Сила, съчетана с красотата



Истински едноетапно нанасящ се материал



Толерантен към влагата



Разширени индикации



Доказана дълготрайност

EQUIA Forte HT								
Въвеждаща опаковка	20 капсули (0.40 г) + 20 единични дози EQUIA Forte Coat 0.1 ml							
Арт. номер	901554	901555			901556			
Цвят	A2	A3			B2			
Промо опаковка	100 капсули (0.40 г) + 1 бутилка EQUIA Forte Coat 4 ml							
Арт. номер	901557	901558	901559	901560				
Цвят	A2	A2-A3	A3	A3-B2				
Клинична опаковка	200 капсули (0.40 г) + 1 бутилка EQUIA Forte Coat 4 ml							
Арт. номер	901561	901562			901563			
Цвят	A2	A3			B2			
Опаковка асорт	50 капсули							
Арт. номер	901572							
Цвят	10 капсули от A2, A3, A3.5, B1, B3							
Допълнително капсули	50 капсули							
Арт. номер	901564	901565	901566	901567	901568	901569	901570	901571
Цвят	A1	A2	A3	A3.5	B1	B2	B3	C4

Допълнителна опаковка покритие	EQUIA Forte Coat
901573	GC EQUIA Forte Coat FlipCap, 4 ml бутилка
900960	GC EQUIA Forte Coat, 50 единични дози

EQUIA и EQUIA Forte са търговски марки на GC.
ChemFil Rock, Ketac Universal и Riva Self Cure не са търговски марки на GC.



GC EUROPE N.V.
Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.02.14
info.gce@gc.dental
www.gceurope.com

GC EUROPE N.V.
GCEEO Bulgaria
BG - София 1202
ул. "Будапеша" 92, ап. 4-3
Тел. +359.2.983.30.30
Факс. +359.2.858.31.37
info.bulgaria@gc.dental
www.eeo.gceurope.com



z OULFBG 2 112 04/19

EQUIA Forte™ HT от GC

Нанасяща се наведнъж гласхибридна възстановителна система


EQUIA Forte HT от GC

Сила, съчетана с красота

Дълготрайните дистални възстановявания вече са лесни

През 2007, GC представи EQUIA, първата гласйонерна система, която може да се използва като дълготрайно възстановяване при подложени на натоварване Клас II кавитети. Тази възстановителна система съчетава **високо вискозен гласйонерен цимент с уникално защитно покритие**. От разработването ѝ редица клинични случаи **демонстрират** нейната **клинична ефикасност**, показвайки удовлетворителна дълготрайност до над 8 години*.

*Gurgan et al. 8-Year Clinical Evaluation of a Glass Ionomer Restorative System. J Dent Res. 2017; 96 Spec Issue B: #0287CED.

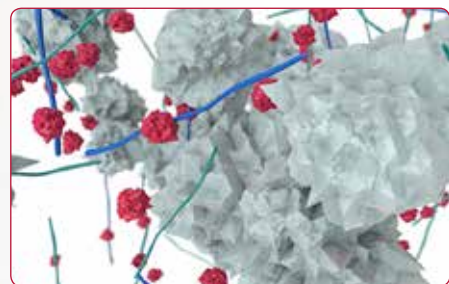

EQUIA Forte HT подобрена гласхбридна технология

- Повърхностно обработено стъкло FAS (Fluoro Alumino Silicate)
- Високо реактивно повърхностно обработено стъкло FAS
- Полиакрилна киселина с високо молекулно число
- Полиакрилна киселина

Отвежда гласхбридите на следващо ниво

При гласхбридите се използва смес от частици на пълнителя с различни размери. Здравината и манипулируемостта на **EQUIA Forte HT** са още по-подобрени чрез разработването на **интелигентен контрол на разпределението и взаимодействието** на стъклените частици. Резултатът? **По-здрав и незалепащ материал, перфектен за нанасяне наведнъж**, дори при Клас II възстановявания, подложени на натоварване*.

*Вижте техническото ръководство за препоръки по отношение на препаратията на кавитета.

Повишена трансlucentност

EQUIA Forte HT се развива още повече, притежавайки вече перфектно **адаптирана трансlucentност** за по-добре изглеждащи дистални възстановявания. **Рефракционният индекс** на матрикса беше адаптиран към този на пълнителите. Като резултат, окончателните възстановявания ще изглеждат **по-естествено и естетично**.




EQUIA Forte Fil
Цвят A2



EQUIA Forte HT Fil
Цвят A2

Здравина

Гласхбридната система предлага здравината на най-иновативните стъкла, заедно с износоустойчивостта на пълнителя. **Уникалната синергия между покритието и възстановителния материал** подобрява трайността и износоустойчивостта.

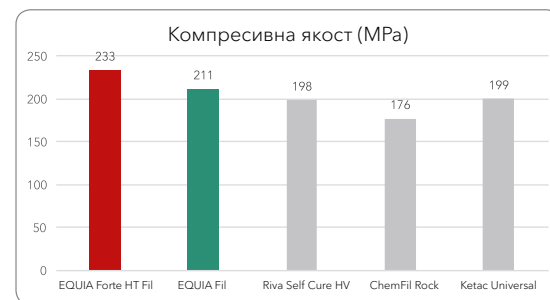

Източник: GC R&D, Япония, 2018. Налични данни.



Основни индикации на EQUIA Forte HT

Процес без усилие

EQUIA Forte HT е създаден да улесни и оптимизира ежедневната Ви ресторативна работа. Тъй като поставянето на кофердам и нанасянето на адхезив са излишни, възстановяването може да бъде завършено бързо. Това е материал, лесен за употреба, без да се компрометира дълготрайността.



Нанеси

Истински материал за едноетапно нанасяне
Удобна капсулна форма

Оформи

Удължено работно време
Лесен за контуриране
Незалепащ

Финирай

Втвърдяване след 2'30"
Лесен за контуриране
Незалепащ

Покрий

Бляскава повърхност без полиране
Перфектно запечатване и износоустойчивост

Фотополимеризирай

Завършено само за 3'25"

След клинично изследване, проведено в цяла Европа, 98% от потребителите бяха удовлетворени от манипулирането на EQUIA Forte HT**

**Налични данни



EQUIA Forte HT е индициран при подложени на натоварване Клас II кавитети*.

Система, основаваща се на Лекота, Стабилност и Увереност!

Отлична биосъвместимост

EQUIA Forte HT може да се използва при техника на частично екскавиране на кариеса, за да се подготви **минимално инвазивна подготовка** (МИ). Тъй като не се използва ецване и системата разчита на химична адхезия, има намален риск от постоперативна чувствителност, което също го превръща в **надеждно лечебно решение**.



Предоставено от Dr. Z Bilge Kütük, Турция

EQUIA Forte HT -
най-добрият Ви партньор
при дисталните възстановявания.

Доказано дълготрайно

EQUIA Forte HT е надеждна система, основана на **12 годишен клиничен опит с EQUIA**.

Дълготрайността на дисталните EQUIA възстановявания е доказана от множество независими, дългосрочни клинични възстановявания¹⁻⁵. Базирайки се на отличия първоначален опит, се очаква гласхбридните системи EQUIA Forte и EQUIA Forte HT да дадат подобен резултат⁶.

- Gurgan et al. 8-Year Clinical Evaluation of a Glass Ionomer Restorative System. J Dent Res. 2017;96 Spec Issue B: #0287CED.
- Gurgan et al. Clinical performance of a glass ionomer restorative system: a 6-year evaluation. Clin Oral Investig. 2017;21(7):2335-2343. **EQUIA срещу композит**
- Türkün et al. A Prospective Six-Year Clinical Study Evaluating Reinforced Glass Ionomer Cements with Resin Coating on Posterior Teeth: Quo Vadis? Oper Dent. 2016;41(6):587-598. **EQUIA срещу Riva SC**
- Basso et al. 7 Years, Multicentre, Clinical Evaluation on 154 Permanent Restorations Made With a Glassionomer-based Restorative System. J Dent Res. 2016;95 Spec Issue B: #0446.
- Klinke T. et al. Clinical performance during 48 months of two current glass ionomer restorative systems with coatings: a randomized clinical trial in the field. Trials. 2016;17(1):239. doi: 10.1186/s13063-016-1339-8. **EQUIA срещу гласйонер със стандартно покритие**
- Gurgan et al. 12-month Clinical-performance of a Glass-hybrid-restorative in Non-caries-cervical-lesions of Patients With Bruxism J Dent Res. 2018;97 Spec Issue A: #0235. **EQUIA Forte срещу композит**