

Гъвкавостта, която искате, здравината, от която се нуждаете. С интелигентно двустранно циментиране.


Независимо от техниката, която използвате, с G-CEM Automix никога няма да ви се наложи да пожертвате адхезията към дентин, емайл или възстановявания с циркониева основа

Това интелигентно "двустранно циментиране" е изключително революционно - но колко сполучливо е то?


Химическата адхезия към зъбните структури, здравата механична връзка към възстановяването, плюс изключително високата якост на огъване, отличават G-CEM Automix от другите самоадхезивни композитни цименти. G-CEM Automix е единственият самоадхезивен цимент, който всъщност подобрява силата на свързване към зъбната структура и циркониевите възстановявания след термоциклиране.




Сила на свързване към емайл и дентин

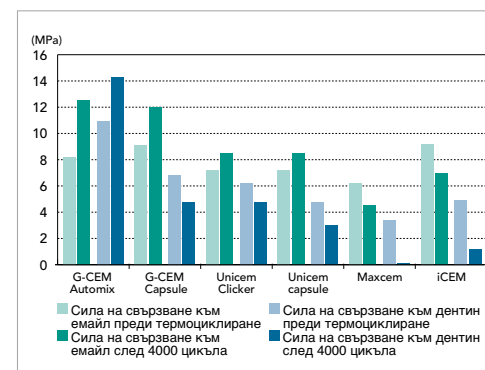


Термоциклиране на възстановяването

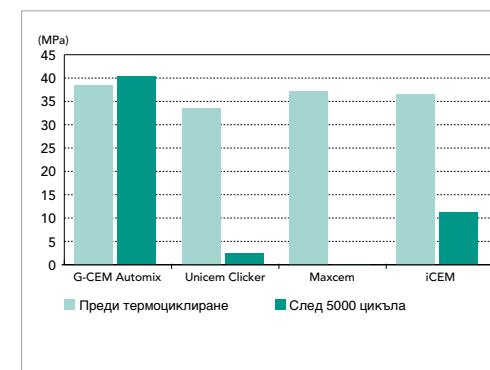

Ретенция на короната към зъбната структура

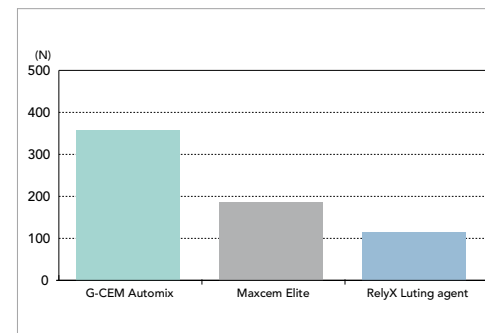

Дебелина на филма [µm]

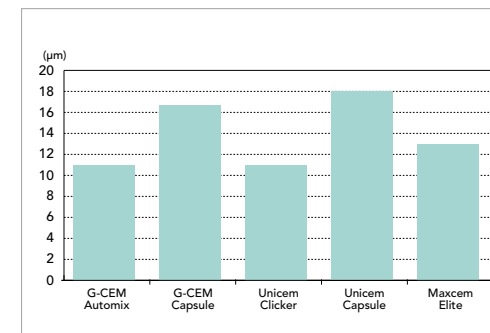

Благодарение на своето здраво и издръжливо свързване, G-CEM Automix запечатва и защитава зъба с минимална дебелина на филма на едностъпковия, самоадхезивен композитен цимент.

G-CEM Automix	
G-CEM Automix, A2, 2 шприци 4.8 g (2.7 ml), 20 автосмесителни обикновени накрайници	
G-CEM Automix, Транслуцент, 2 шприци 4.8 g (2.7 ml), 20 автосмесителни обикновени накрайници	
G-CEM Automix, AO3, 2 шприци 4.8 g (2.7 ml), 20 автосмесителни обикновени накрайници	
G-CEM Automix, BO1, 2 шприци 4.8 g (2.7 ml), 20 автосмесителни обикновени накрайници	
G-CEM Automix Аксесоари	
G-CEM Automix, Обикновени накрайници, 20 броя	
G-CEM Automix, Ендодонтски накрайници, 10 Ендодонтски автосмесителни накрайници, 10 удължаващи накрайници	
G-CEM Капсули	
G-CEM, A2, Кутия от 50 Капсули, Смесен обем в капсула 0.17 ml	
G-CEM, AO3, Кутия от 50 Капсули, Смесен обем в капсула 0.17 ml	
G-CEM, Транслуцент, Кутия от 50 Капсули, Смесен обем в капсула 0.17 ml	
G-CEM, BO1, Кутия от 50 Капсули, Смесен обем в капсула 0.17 ml	
G-CEM, Асорт, Кутия от 50 Капсули, Смесен обем в капсула 0.17 ml	

GC EUROPE N.V.
Head Office
Interleuvenlaan 33
B - 3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
info@gceurope.com
www.gceurope.com

GC EUROPE N.V.
GC EEO - Bulgaria
BG - София 1202
ул. "Будапеща" 92, ап. 4-3
Тел. +359.2.983.30.30
Факс. +359.2.858.31.37
bulgaria@eoo.gceurope.com
www.eoo.gceurope.com

'GC.'

z O L F B G 2 16 03/09

'GC.'

Преоткрийте
циментирането
с КОМПОЗИТ.
Новият **G-CEM
Automix** от GC.

Най-после можете да постигнете двойно,
дълготрайно, здраво свързване в една стъпка
към зъбните структури и към естетични
възстановявания, особено към цирконий.

Интелигентното ЕДНОСТЪПКОВО решение за циментиране с АВТОМАТИЧНО СМЕСВАНЕ и ЛЕКОТА.

Първият самоадхезивен композитен цимент за залепване еднакво добре към зъбните структури и към възстановяванията, особено към циркониевите.

Цирконият е популярен избор при изработката на естетични възстановявания, особено за корони и мостове. G-CEM Automix от GC ще стане предпочитан от стоматолозите. Причината: G-CEM Automix е първият интелигентен, самоадхезивен, композитен цимент, предлагащ "автоматична" лекота, без да компрометира силата на свързване към дентин, емал и ИЛИ цирконий. Нещо повече, силата на свързване остава стабилна, а при някои материали, дори се увеличава с течение на времето.

Използвайте G-CEM Automix и се насладете на:

- Едностъпково смесване - това е всичко, което трябва да направите
- Едностъпково нанасяне - директно нанасяне, дори и в кореновия канал
- Едностъпково почистване - прецизно отстраняване на всички излишъци

С идеалното време за работа и надеждните резултати, които очаквате от GC.




Допълнителни ПРЕДИМСТВА на G-CEM Automix.

Стабилен до последната капка


G-CEM Automix е високо надежден и има голяма стабилност. Тъй като G-CEM няма специални изисквания за съхранение, можете да очаквате върховно качество - от първата до последната капка. Тестове доказаха, че дори при 60°C, G-CEM Automix не се превръща в гел, не се оцветява и можете да го използвате с еднаква консистенция всеки път.

Вашият избор при възстановяване


Въпреки, че G-CEM Automix се свързва еднакво добре към зъбните структури и циркония, той демонстрира отлични циментиращи свойства и към другите възстановителни материали. Свободни сте винаги да изберете правилното възстановяване за вашите пациенти. G-CEM Automix се отличава с най-ниското линейно разширение сред самоадхезивните композитни цименти. Без значение какъв тип керамични възстановявания изработвате - винаги можете да се доверите на G-CEM Automix.

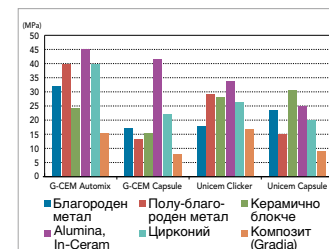


Сила на свързване към възстановяванията

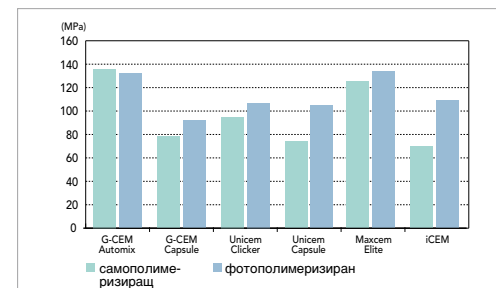

Якост на огъване

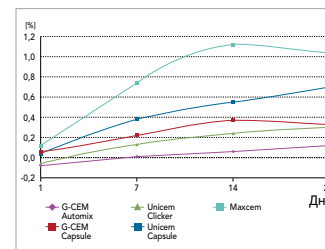

Линейно разширение

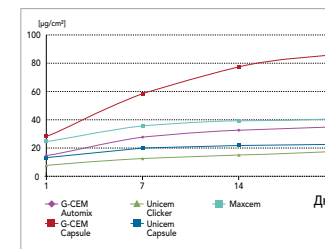


Кумулативно излъчване на флуор

Невероятно прецизен и дълготраен

Благодарение на уникалната си формула G-CEM Automix е по-хидрофилен при апликацията - което води до безкомпромисна адхезия към влажни зъбни структури. G-CEM не съдържа НЕМА, което осигурява оптимална и стабилна връзка във времето. А и с малкото поемане на вода от G-CEM и намаления потенциал за оцветяване, вие ще бъдете възхитени от отличното ниво на цетова стабилност, а вашите пациенти ще се наслаждават на естествения вид на своите възстановявания.

Още причини да изберете G-CEM:

- Без постоперативна чувствителност
- Излъчва флуор
- Рентгеноконтрастен

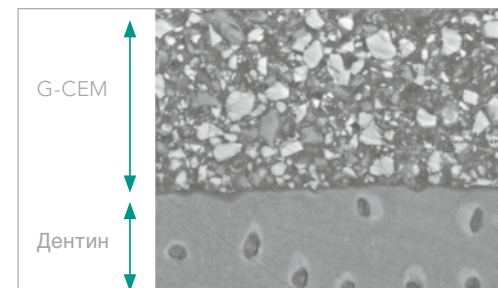

Дентин / цимент контактна повърхност

Съкратете ВРЕМЕТО на стола - не на ИЗПЪЛНЕНИЕТО.

G-CEM Automix е разработен по повече от един начин да ви помогне бързо и ефикасно да се справите с различните възстановявания с много по-добри резултати - и да задоволите повече пациенти.

Нанася се лесно - а после остава и остава

Можете да използвате двукомпонентната шприца, за да работите още по-ефективно с G-CEM Automix - само в три лесни стъпки:

1. Нанесете прецизно количеството, от което се нуждаете във възстановяването.
2. Поставете възстановяването и по възможност полимеризирайте 2-4 секунди.
3. Отстранете излишъците със скалер и извършете окончателното полимеризиране или оставете да самополимеризира за около 4 минути.

G-CEM Automix е идеален за случаи, които изискват по-дълго време за работа, като многочленни възстановявания.



Dr. Adrian Berger, Germany

Търсите лесно решение за циментиране на щифтове? G-CEM Automix е със специален ендодонтски накрайник с удължена дюза за нанасяне в канала при циментиране на радикуларен щифт.



Dr. Matteo Basso, Italy

G-CEM се предлага и в капсули с основна индикация за единични възстановявания (не повече от 2 члена).

